

Bruksanvisning

Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på bruksanvisningen. Du kan få behov for å lese den igjen.

**FJERNER VORTER EFFEKTIVT****1. INNLEDNING**

Vortefri FREEZE er en rask hjemmebehandling som effektivt fjerner vorter på hender, armer og føtter. Dette er den første hjemmebehandling med dinitrogenoksid, en svært kald gass. Ved hjelp av en Ultra Freeze Technology™ fryses vorten ved -80°C og når de dypeste lagene i vorten.

Vortefri FREEZE har en veldig lav starttemperatur (-80°C), som holder seg under bruk. Sammenlignet med annen frysebehandling til hjemmebruk er Vortefri FREEZE den hjemmebehandling med desidert lavest temperatur, som vist i en in-vitro temperatur test. Vortefri FREEZE er derfor mer effektiv.

Vortefri FREEZE er et high-tech produkt som er raskt og enkelt i bruk. Behandlingen er egnet for voksne og barn over 4 år.

2. HVA DU MÅ VITE FØR OG ETTER BEHANDLING**Bruk ikke Vortefri FREEZE**

- på barn under 4 år
- i ansiktet, lysken, på kjønnsorganer, hodebunnen eller slimhinner
- på frisk hud (hud uten vorter)
- på vorter som befinner seg på følsom hud, vær spesielt forsiktig ved behandling av områder med tynn hud (for eksempel rundt leddene)
- hvis vorten og/eller omkringliggende hud blør eller er åpen, er irritert, klør, er betent eller rød
- hvis du ikke er sikker på om utveksten er en vanlig vorte skal du rådføre deg med lege før bruk
- på føflekker, liktørner, vabler eller andre hudskader eller noe som kan være hudkreft (melanom)
- på væskefylte blemmer på huden (kalt «molluscum contagiosum») eller andre blærer eller blemmer
- hvis du er gravid eller ammer
- hvis du er diabetiker eller har problemer med blodsirkulasjonen eller blodpropp
- på flere vorter samtidig, hvis de ligger tett sammen. Vent 14 dager før du behandler neste vorte.

Forsiktighetsregler

- Skal ikke inhaleres. Kun til utvortes bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Skal ikke påføres lenger enn i 15 sekunder på hender og armer, eller 40 sekunder på føtter. Overdreven eller ukorrekt bruk kan medføre smerter og skade på hud eller nerver.
- Vortefri FREEZE skal brukes av en voksen ved behandling av vorter på barn.
- Dinitrogenoksid er en gass som ikke er giftig eller brennbar, men den kan medvirke til antennelse i tilfelle av brann. Skal ikke utsettes for varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Ikke røyk eller bruk gassen i nærheten av åpen ild.
- Trykkbeholder. Kan gå i stykker hvis den blir oppvarmet. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk – beholderen er under høyt trykk og kan ikke åpnes.

For best resultat på fotvorter

Hard hud på toppen av vorten gjør frysingen vanskeligere. For best resultat på fotvorter:



- Bløt opp det aktuelle området i lunkent vann inntil huden blir myk.
- Fjern forsiktig overflødig hud på innovervoksende vorter på foten med f.eks. en fotfil.
- Pass på at vorten og huden omkring er helt tørr før behandling.
- Ikke fil direkte på vorten, den kan bli øm og danne en ny og hard overflate.

Etter bruk av Vortefri FREEZE

Bruk av Vortefri FREEZE kan gi en prikkende følelse i huden, og huden kan bli øm eller irritert. Denne følelsen bør forsvinne etter noen få timer. Rett etter behandlingen vil hudområdet som er behandlet bli helt hvitt. Etter en liten stund vil huden få igjen sin normale farge og vorten vil se rød ut.

I løpet av få minutter til flere dager etter frysebehandling, kan det oppstå blemmer, av og til fylt med blod. Dette er et vanlig forløp i behandlingen, og viser vanligvis at behandlingen har vært vellykket. Ikke ta hull på blemmen. Hvis nødvendig, beskytt med en steril kompress. Hvis det har gått hull på blemmen, desinfiser godt.

Den behandlede vorten vil langsomt forsvinne i løpet av 10 til 14 dager. Det kan imidlertid ta lenger tid før huden blir helt frisk igjen.

Hvis vorten befinner seg på fotsålen kan det være vondt å gå på den. Fort å lindre smerten kan man sette på et liktørnplaster uten syre til avlastning.

- Ikke plukk på området som er behandlet eller prøv å rive vorten av!
- Hold området som er behandlet rent og desinfiser hvis nødvendig.
- Man kan bade og dusje rett etter behandlingen.

Er det nødvendig å gjenta behandlingen?

Vortefri FREEZE er veldig effektiv, kjernen av vorten når raskt og blir ødelagt av den kalde temperaturen. Vanligvis er bare én behandling nødvendig. Gamle eller store vorter kan behøve mer enn én behandling, særlig hvis de er på fotsålen.

Vorten vil sakte forsvinne etter 10 til 14 dager. Hvis vorten, eller deler av den, ikke forsvinner i løpet av 14 dager, må du gjenta behandlingen og trinn 1, 2 og 3. Se punkt 6. SLIK BRUKER DU VORTEFRI FREEZE.

Hvis vorten ikke forsvinner etter 3 behandlinger, bør du kontakte lege.

Kontakt lege:

- hvis du eller barnet ditt får uventede bivirkninger
- hvis vorten ikke leges
- hvis vorten ikke har forsvunnet etter 3 behandlinger.

3. MULIGE BIVIRKNINGER**Mulige bivirkninger omfatter**

- Blemmer (kan være blodfylte) rundt området som er behandlet – dette varierer fra tilfelle til tilfelle, se pkt 2 «Etter bruk av Vortefri FREEZE».
- At huden mister farge, kalt “depigmentering”.
- Mindre brannsårl og arrdannelse.
- Fare for hud- / nerveskade (ved overeksponering).
- Forbigående forstyrrende følelse (prikking, prikkende følelse)

4. OPPBEVARING AV VORTEFRI FREEZE**Før første gangs bruk**

- Oppbevares tørt og kjølig (mellom 5 og 25°C). Beskyttet fra sollys.
- Skal ikke oppbevares i fryser.
- Skal ikke eksponeres for temperaturer over 50°C. Skal ikke oppbevares i bil, campingvogn eller andre steder som blir varme. En økning av temperaturen vil skade beholderen og gjøre den permanent ubrukelig.


Etter hver bruk

- Sett lokket på og oppbevar i kjøleskap – dette vil gi Vortefri FREEZE en lenger holdbarhet og øke antallet effektive doser.
- Skal ikke oppbevares i fryser.

- Utsett ikke den aktiverte beholderen for temperaturer over 35°C, da dette vil aktivere en sikkerhetsmekanisme som gjør beholderen permanent ubrukelig.

- Vent i to minutter etter bruk, kast engangstuppen og sett inn en ny tupp. Vortefri FREEZE er nå klar til neste bruk.

- Hvis du skal rengjøre plastdelene på beholderen, bruk bare en fuktig klut.

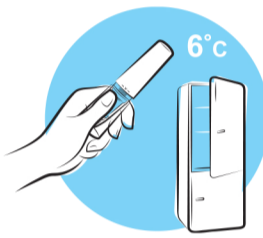**5. YTTERLIGERE INFORMASJON****Pakning og utløpsdato**

- Én pakning inneholder én Vortefri FREEZE beholder (7,5g flytende dinitrogenoksid), et sett med 6 engangstupper og en bruksanvisning.
- Ved 2 sekunders lading før hver bruk, kan produktet gi maksimalt 7 behandlinger.
- Holdbarhet i kjøleskap etter aktivering: 2 måneder.
- Bruk ikke dette produktet etter utløpsdatoen, som står på pakningen.
- Kast den tomme beholderen i henhold til aktuelle forskrifter om avhending av husholdningsavfall.

Hva skal du gjøre hvis beholderen er tom eller skadet:

- Hvis du ikke ser rim eller frostrøyk etter en vellykket aktivering og lading av beholderen (se punkt 6. SLIK BRUKER DU VORTEFRI FREEZE), er den tom for gass – bruk en ny Vortefri FREEZE.
- Hvis det fortsatt er en susende lyd etter at du har aktivert produktet og all gassen slipper ut, er beholderen ødelagt. Ikke prøv å åpne eller reparere beholderen selv, selv om du tror at den er tom – returner produktet til apoteket.

6. SLIK BRUKER DU VORTEFRI FREEZE**! FØR DU STARTER BEHANDLING, LES TRINNENE UNDER****AKTIVERE**

Skal kun utføres før første gangs bruk

Vortefri FREEZE må aktiveres før bruk. **Fjern ikke korken enda.**




1 x omdreining = Klikk!

Vri den hvite delen av produktet i minimum en hel omdreining i pilens retning til du hører et tydelig klikk. Du må nok bruke litt kraft. Du kan høre noen svakere klikkelyder underveis.

Aktiveringen skal kun gjøres før første gangs bruk og skal ikke gjentas.

1**LAD**

Før hver behandling må Vortefri FREEZE lades med kald gass.

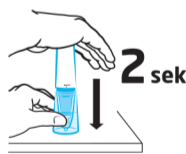

2 sek

Plasser Vortefri FREEZE stående på et stabilt og flatt underlag, med den transparente korken ned. Hold beholderen med et fast grep. Med den andre hånden, **skv** den hvite delen ned i nøyaktig 2 sekunder.

Presser du ned i lenger enn 2 sekunder, vil du bruke mer enn én dose. Bruker du under 2 sekunder, reduseres fryseeffekten.

2**SJEKKE**

Ta av den transparente korken og bruk produktet umiddelbart!

Du skal se **frostrøyk** fra tuppen av produktet. Er det ingen frostrøyk, gjenta trinn 1.

3**BEHANDLE**

15 sek

40 sek

Press tuppen fast mot vorten.

For best resultat er tiden avgjørende!


- 15 sekunder på hender, fingre og armer
- 40 sekunder på føtter

Sett lokket på igjen.

FERDIG!

Oppbevares i kjøleskap etter bruk.

6°C

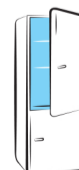

Vorten vil sakte forsvinne i løpet av 10 til 14 dager. Hvis vorten, eller deler av den, ikke har forsvunnet etter 14 dager, gjenta trinn 1, 2 og 3.